

Veillez noter que la procédure est la même que pour Gonorrhée par PCR.

FOURNITURES MÉDICALES

- Hommes : contenant d'urine stérile seulement
- Femmes : contenant d'urine stérile ou trousse de collecte Cobas® PCR

- Contenant d'urine stérile ou trousse de prélèvement cobas® PCR;
- Sac biorisque;
- Stabilité:
 - Urine : 24 heures entre 2°C et 30°C
 - Trousse de prélèvement cobas® PCR
 - 1) Échantillon vaginal : 90 jours entre 2°C et 30°C
 - 2) Échantillon endocervical et cervical : 12 mois entre 2°C et 30°C

CONTENANT D'URINE STÉRILE

Préparation

- 1) Il est préférable d'utiliser le premier jet de la première urine du matin.
- 2) Ne pas uriner au moins 2 heures avant la collecte du spécimen.
- 3) Femmes:
 - a. Aviser votre médecin si vous êtes dans votre période menstruelle.
 - b. Ne pas nettoyer la zone labiale avant la collecte du spécimen.

Prélèvement pour hommes et femmes

- 1) Lavez vos mains avec de l'eau et du savon;
- 2) Ouvrir le contenant stérile;
- 3) Urinez dans le contenant stérile. Un volume d'au moins 10 mL est nécessaire pour l'analyse. Si besoin est, éliminez le reste de vos urines dans les toilettes;
- 4) Refermez le contenant hermétiquement.
- 5) Identifiez le contenant:
 - Prénom, nom de famille
 - Date de naissance ou numéro d'assurance maladie
 - Date et heure du prélèvement
- 6) Retournez le contenant immédiatement à votre médecin ou au laboratoire.


TROUSSE DE PRÉLÈVEMENT COBAS® PCR (FEMMES SEULEMENT)

Préparation


- 1) Ne pas tremper l'écouvillon dans le tube cobas® PCR Media avant d'exécuter le prélèvement.
- 2) Porter des gants.

Prélèvement vaginal


- 1) Insérer l'écouvillon à une profondeur d'environ 5cm dans l'ouverture vaginale.
- 2) Faire tourner doucement l'écouvillon pendant environ 30 secondes tout en le frottant contre les parois vaginales.

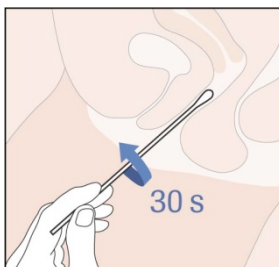


- 3) Retirer soigneusement l'écouvillon.
- 4) Avant de placer l'écouvillon dans le tube, veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec aucune autre surface.
- 5) Retirer le bouchon du tube de milieu cobas® PCR et insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube.

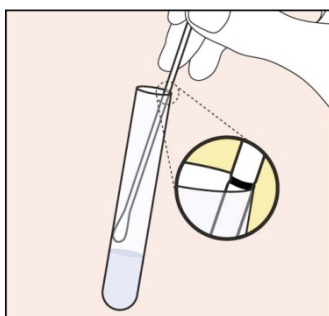

- 6) Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne noire. Jeter la partie supérieure de l'écouvillon.

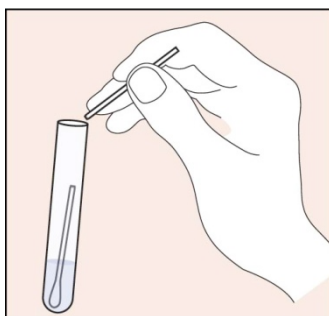

- 7) Refermer le tube de milieu cobas® PCR en serrant bien le bouchon. L'échantillon est prêt pour le transport.

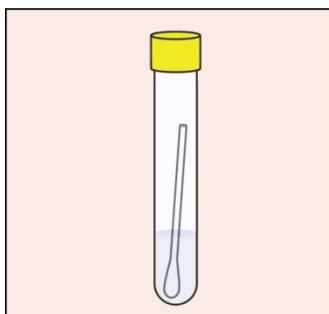

- 8) L'échantillon sera rejeté s'il y a :
 - a. Absence d'écouvillon dans un tube.
 - b. Présence de deux écouvillons dans un même tube.




- c. Echantillon obscur ou présentant des traces de sang.




PRÉLÈVEMENT ENDOCERVICAL


- 1) Effectuer un nettoyage du mucus avec un des deux écouvillons fournis. Jeter cet écouvillon après usage.
- 2) Réaliser le prélèvement par écouvillonnage en utilisant l'autre écouvillon fourni.
- 3) Effectuer 5 rotations dans le même sens dans le canal endocervical (ne pas tourner dans l'autre sens) et retirer l'écouvillon sans toucher les muqueuses.
- 4) Retirer le bouchon du tube de milieu cobas® PCR et insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube.

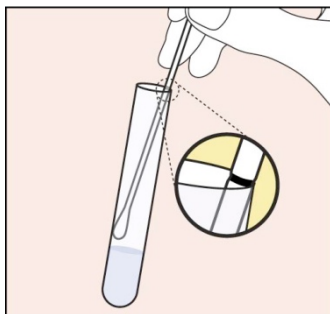

- 5) Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne noire. Jeter la partie supérieure de l'écouvillon.

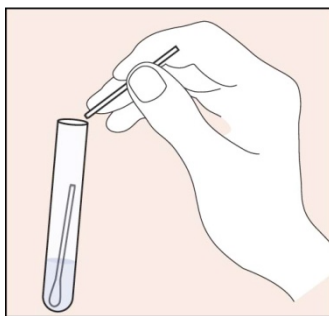

- 6) Refermer le tube de milieu cobas® PCR en serrant bien le bouchon. L'échantillon est prêt pour le transport.

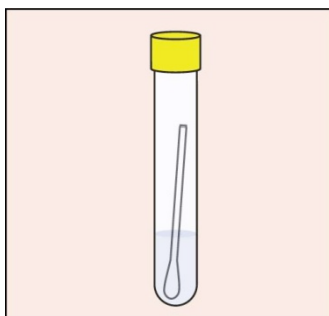

- 7) L'échantillon sera rejeté s'il y a :
- a. Absence d'écouvillon dans un tube.
 - b. Présence de deux écouvillons dans un même tube.



- c. Échantillon obscur ou présentant des traces de sang.

